



GENUTONIC

Ref. TO3120

Elastyczna orteza na kolano z regulowanym zegarem policentrycznym dbanie o kolano z zachowaniem bezpieczeństwa. Lekkie i wygodne.

OPIS

Najnowocześniejsza orteza ortopedyczna. Struktura wykonana z elastycznego, oddychającego, skalibrowanego materiału zapewnia niezbędną stabilizację stawu. Łatwy w noszeniu, nie posiada szwów w zagłębieniu podkolanowym, zapewniając maksymalny komfort. Stabilizator, wykonany z całkowicie nietoksycznego materiału polimerowego, ma anatomiczny kształt, który umożliwia prawidłową stabilizację stawu udowo - rzepkowego. Struktura składa się z "Combined Resistex" z włóknem węglowym: antystatycznym, oddychającym, termoregulatorem, bakteriostatycznym, hipoalergicznym i wykonawczym (podczas ćwiczeń fizycznych zmniejsza stężenie kwasu mlekowego poprawiając przepływ krwi i dotlenienie komórek).

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

Włókno węglowe C6Tex, elastyczne i 100% oddychające. Anatomiczny rzepka, stabilizator z nietoksycznego materiału. Pozostaje policentryczne z regulacją zgięcia-wyprostu. Materiał C6Tex, elastyczny i 100% oddychający. Wnętrze wykonane z delikatnego aksamitu dla lepszego komfortu. Brak szwów w otworze podkolanowym. Otwarty z przodu. Łatwy system zamykania. Bez efektu remis. Tylne elastyczne paski dla lepszej stabilizacji. Zawiasy policentryczne z regulacją zgięcia-wyprostu. Regulacja zgięcia w zakresie 0°-15°-30°-45°-60°-75°-90°. Regulacja wyprostu przy 15°-30°-45°. Unieruchomienie w 0°-15°-30°-45°.

PRZEZNACZENIE

Terapeutyczne i nieinwazyjne wyroby medyczne, których celem jest korygowanie wad postawy lub stabilizacji kończyn.

WSKAZANIA

Stabilność latero-medialna • zapobieganie skręceniu kolana • chondromolacja rzepki • leczenie więzadeł • pomocny przy artrozie nieoperacyjnego kolana • zabezpieczenie w sporcie.

ZAŁOŻENIE

1. Otwórz osiem przednich pasów zapinanych na rzep.
2. Chwyć aparat ortodontyczny obiema rękami, trzymając większy bok do góry, a otwór rzepki przedni. (Logo Tenortho musi być ustawione w pozycji górnej).
3. Załóż (wciągnij) ochraniacz kolana, aż otwór będzie idealnie umieszczony na rzepce.
4. Zamknij paski rzepowe, zaczynając od zewnętrznych.
5. W razie potrzeby wyreguluj kąt zgięcia-wyprostu. (Operacja ta musi być wykonana absolutnie przez technika, uważając, aby nie zmienić osi obrotu).



Tenortho
Get back in action

via Trento e Trieste, 100
20853 Biassono (MB)

Italy



tenortho.com



info@tenortho.com



+39 039 8943960



tenortho



GENUTONIC

Ref. TO3120

Elastyczna orteza na kolano z regulowanym zegarem policentrycznym dbanie o kolano z zachowaniem bezpieczeństwa. Lekkie i wygodne.

LUDNOŚĆ I OGRANICZENIA W UŻYCIU

Urządzenia Tenortho są ogólnie wskazane do użytku u osób dorosłych powyżej 12 roku życia. Produkt powinien być używany wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem (patrz ulotka z instrukcją, rozdział "Wskazania"). Niektóre urządzenia, które mają różne rozmiary, pediatryczne lub są wykonane na miarę, mogą być również używane u dzieci w wieku od 3 lat. Zaleca się ostrożność i zasięgnięcie porady lekarza przed użyciem jakichkolwiek urządzeń, które mogą zakłócać działanie macicy u kobiet w ciąży (kołnierze ze stabilizatorami mostkowo-grzbietowymi, pasy lędźwiowe, gorsety, ortozy barkowe i biodrowe itp.). Szczególną uwagę i dokładną ocenę lekarską należy zwrócić na stosowanie aparatów ortodontycznych, które mogą utrudniać oddychanie u pacjentów z patologiami lub trudnościami w oddychaniu (nadmierne rozciągnięcia, gorsety, kołnierze, szelki, itp.). Produkt zawierający magnetoterapię (TO1308MG - TENOMAG) nie powinien być stosowany u kobiet w ciąży ani u osób z wszczepionymi urządzeniami (rozruszniki serca, defibrylatory lub implanty stałe). Zapoznaj się z instrukcją obsługi producenta urządzenia do magnetoterapii.

KONSERWACJA

Jeśli to możliwe, usuń szyny i metalowe ramy przed praniem. Pierz ręcznie w ciepłej wodzie z dodatkiem łagodnego mydła; następnie splotcz czystą wodą. Susz z dala od źródeł ciepła. Skontaktuj się z technikiem ortopedą w przypadku problemów lub zużytych części, które wymagają wymiany. Nie wyrzucać produktu do środowiska.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE STOSOWANIA

Urządzenie nie może wywierać nacisku na żadną część ciała, która jest zraniona lub opuchnięta. W przypadku wątpliwości co do zastosowania należy skonsultować się z technikiem ortopedą. Nie nosić urządzenia w pobliżu otwartego ognia.

NADZÓR ZDROWOTNY

W celu ciągłej kontroli stanu zdrowia w celu zapewnienia możliwie najbezpieczniejszego użytkownika produktów Tenortho, prosimy o zgłaszanie wszelkich poważnych działań niepożądanych, które wystąpią podczas stosowania produktu, wysyłając wiadomość e-mail na adres ufficiotecnico@tenortho.com

Należy również zgłosić zdarzenie właściwym organom.

OSTRZEŻENIA

Urządzenie musi być przepisane przez lekarza i założone przez technika ortopedę, który jest kompetentną osobą uprawnioną zarówno do zastosowania, jak i do udzielania informacji o bezpiecznym użytkowaniu. Założenie urządzenia musi być przeprowadzone z najwyższą starannością, aby zapewnić skuteczność, tolerancję i prawidłowe działanie. O wszelkich zmianach konstrukcyjnych i innych musi decydować lekarz i przeprowadzać je technik ortopeda. Zalecane jest użycie produktu przez jedną osobę. Bezpośredni kontakt urządzenia ze skórą może powodować zaczerwienienie lub podrażnienie u bardzo wrażliwych osób. Nie należy umieszczać produktu na zranionej skórze. W przypadku nietolerancji należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

SPRZEDAŻ

Nie wyrzucać produktu do środowiska. Produkt należy utylizować zgodnie z przepisami dotyczącymi odpadów obowiązuje w gminie i / lub stanie. Produkt nie stwarza ryzyka zanieczyszczenia.

GWARANCJA


Tenortho zaświadcza, że produkt został wyprodukowany poprawnie, zastosowano materiały najwyższej jakości, zostały przeprowadzone wszystkie niezbędne testy oraz, że jest zgodny z obowiązującymi normami i przepisami. Tenortho zobowiązuje się naprawić wszelkie wady, brak jakości lub niezgodności Produktów, które nastąpiły z winy producenta, które powstaną w ciągu 6 (sześciu) miesięcy od dostawy Produktów, i które zostaną przekazane niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż siedem dni od dnia wykrycia wady lub usterki. Tenortho może podjąć decyzję o naprawie lub wymianie Produktów, które okażą się wadliwe. Produkty wymienione lub naprawione w ramach gwarancji będą objęte tą samą gwarancją przez 6 (sześć) miesięcy od dnia naprawy lub wymiany. Wady zgodności, a tym samym rękojnia, nie obejmują żadnych wad lub szkód powstałych w wyniku zdarzeń losowych lub z odpowiedzialności Użytkownika (np. Niedbałość, brak lub nieprawidłowe czyszczenie) lub używanie produktów niezgodne z ich przeznaczeniem lub normalnym zużyciem. Zachowaj opakowanie, etykiety i dowód zakupu, aby zapewnić odpowiednią identyfikowalność partii.




Prać ręcznie w ciepłej wodzie



Nie suszyć w suszarce

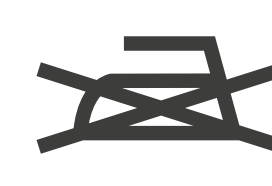

Nie prasować

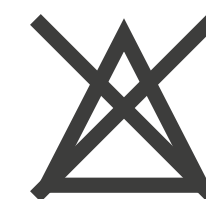

Nie wybielać



Produkt zgodny z rozporządzeniem UE 745/2017 - wydany 04/2021 - wersja 0
Certyfikowana firma: system jakości certyfikowany zgodnie z ISO 9001: 2015 i ISO 13485: 2016



Producent

REF

Artykuł nr.

LOT

Numer LOT



Wyrób medyczny