

AGILOMB LUMBOSACRAL

Ref. TO1103 Gorset lędźwiowo - krzyżowy

LUDNOŚĆ I OGRANICZENIA W UŻYCIU

Urządzenia Tenortho są ogólnie wskazane do użytku u osób dorosłych powyżej 12 roku życia. Produkt powinien być używany wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem (patrz ulotka z instrukcją, rozdział "Wskazania"). Niektóre urządzenia, które mają różne rozmiary, pediatryczne lub są wykonane na miarę, mogą być również używane u dzieci w wieku od 3 lat. Zaleca się ostrożność i zasięgnięcie porady lekarza przed użyciem jakichkolwiek urządzeń, które mogą zakłócać działanie macicy u kobiet w ciąży (kotnierze ze stabilizatorami mostkowo-grzbietowymi, pasy lędźwiowe, gorsety, ortozy barkowe i biodrowe itp.). Szczególną uwagę i dokładną ocenę lekarską należy zwrócić na stosowanie aparatów ortodontycznych, które mogą utrudniać oddychanie u pacjentów z patologiami lub trudnościami w oddychaniu (nadmierne rozciągnięcia, gorsety, kotnierze, szelki, itp.). Produkt zawierający magnetoterapię (TO1308MG - TENOMAG) nie powinien być stosowany u kobiet w ciąży ani u osób z wszczepionymi urządzeniami (rozzruszniki serca, defibrylatory lub implanty stałe). Zapoznaj się z instrukcją obsługi producenta urządzenia do magnetoterapii.

KONSERWACJA

Jeśli to możliwe, usuń szyny i metalowe ramy przed praniem. Pierz ręcznie w ciepłej wodzie z dodatkiem łagodnego mydła; następnie spłucz czystą wodą. Susz z dala od źródeł ciepła. Skontaktuj się z technikiem ortopedą w przypadku problemów lub zużytych części, które wymagają wymiany. Nie wyrzucać produktu do środowiska.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE STOSOWANIA

Urządzenie nie może wywierać nacisku na żadną część ciała, która jest zraniona lub opuchnięta. W przypadku wątpliwości co do zastosowania należy skonsultować się z technikiem ortopedą. Nie nosić urządzenia w pobliżu otwartego ognia.

NADZÓR ZDROWOTNY

W celu ciągłej kontroli stanu zdrowia w celu zapewnienia możliwie najbezpieczniejszego użytkowania produktów Tenortho, prosimy o zgłaszanie wszelkich poważnych działań niepożądanych, które wystąpią podczas stosowania produktu, wysyłając wiadomość e-mail na adres ufficiotecnico@tenortho.com. Należy również zgłosić zdarzenie właściwym organom.

OSTRZEŻENIA

Urządzenie musi być przepisane przez lekarza i założone przez technika ortopedę, który jest kompetentną osobą uprawnioną zarówno do zastosowania, jak i do udzielania informacji o bezpiecznym użytkowaniu. Założenie urządzenia musi być przeprowadzone z najwyższą starannością, aby zapewnić skuteczność, tolerancję i prawidłowe działanie. O wszelkich zmianach konstrukcyjnych i innych musi decydować lekarz i przeprowadzać je technik ortopeda. Zalecane jest użycie produktu przez jedną osobę. Bezpośredni kontakt urządzenia ze skórą może powodować zaczerwienienie lub podrażnienie u bardzo wrażliwych osób. Nie należy umieszczać produktu na zranionej skórze. W przypadku nietolerancji należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

SPRZEDAŻ

Nie wyrzucać produktu do środowiska. Produkt należy utylizować zgodnie z przepisami dotyczącymi odpadów obowiązuje w gminie i / lub stanie. Produkt nie stwarza ryzyka zanieczyszczenia.

GWARANCJA

Tenortho zaświadcza, że produkt został wyprodukowany poprawnie, zastosowano materiały najwyższej jakości, zostały przeprowadzone wszystkie niezbędne testy oraz, że jest zgodny z obowiązującymi normami i przepisami. Tenortho zobowiązuje się naprawić wszelkie wady, brak jakości lub niezgodności Produktów, które nastąpiły z winy producenta, które powstaną w ciągu 6 (sześciu) miesięcy od dostawy Produktów, i które zostaną przekazane niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż siedem dni od dnia wykrycia wady lub usterki. Tenortho może podjąć decyzję o naprawie lub wymianie Produktów, które okażą się wadliwe. Produkty wymienione lub naprawione w ramach gwarancji będą objęte tą samą gwarancją przez 6 (sześć) miesięcy od dnia naprawy lub wymiany. Wady zgodności, a tym samym rękojmia, nie obejmują żadnych wad lub szkód powstałych w wyniku zdarzeń losowych lub z odpowiedzialności Użytkownika (np. Niedbałość, brak lub nieprawidłowe czyszczenie) lub używanie produktów niezgodne z ich przeznaczeniem lub normalnym zużyciem. Zachowaj opakowanie, etykiety i dowód zakupu, aby zapewnić odpowiednią identyfikowalność partii.



Prać ręcznie w ciepłej wodzie



Nie suszyć w suszarce



Nie prasować



Nie wybielać



Produkt zgodny z rozporządzeniem UE 745/2017 - wydany 04/2021 - wersja 0
Certyfikowana firma: system jakości certyfikowany zgodnie z ISO 9001: 2015 i ISO 13485: 2016



Producent

REF


Artykuł nr.

LOT

Numer LOT



Wyrób medyczny

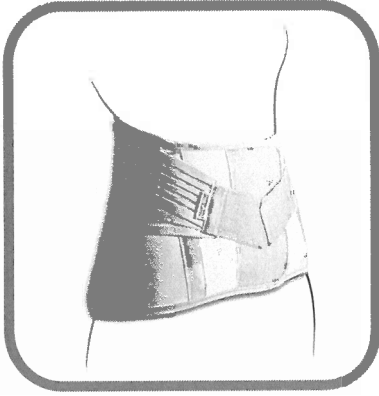

AGILOMB LUMBOSACRAL

Ref. TO1103 Gorset lędźwiowo - krzyżowy

OPIS

Nowoczesny gorset medyczo-ortopedyczny o innowacyjnym wyglądzie, wykonany z materiału "Resistex". Oddychająca i termoregulacyjna, bakteriostatyczna i hipoalergiczna tkanina, wspomaga przepływ krwi i dotlenienie komórkowe, minimalizując stężenie kwasu mlekowego podczas aktywności fizycznej. Elastyczna tkanina, która jest ekskluzywna w branży ortopedycznej Tenortho. kontrolowana trakcja sprawia, że konieczne jest kontrolowanie drobnej patologii w obszarze lumbo i lumbosacral. Łatwe w noszeniu, doskonałe dopasowanie, zapewnia odpowiednie podparcie pleców, zapewniając dobre samopoczucie i ulgę podczas codziennej aktywności.

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

Połączona tkanina "Resistex". Antystatyczna (specjalne włókna pochłaniają i rozpraszają ładunki elektryczne). Oddychający i termoregulacyjny, bakteriostatyczny i hipoalergiczny, materiał wspomaga przepływ krwi i dotlenienie komórek, minimalizując stężenie kwasu mlekowego. System zapinania na rzep. Tył elastycznych, wzmocnionych fiszbin w celu uzyskania dopasowanego nacisku. Powierzchnia lędźwiowo-grzbietowa jest podtrzymywana przez regulowane wzmocnienia wewnątrz gorsetu. Obszar brzucha jest podtrzymywany przez ukośne spiralne fiszbiny.

PRZEZNACZENIE

Terapeutyczne i nieinwazyjne wyroby medyczne, których celem jest korygowanie wad postawy lub stabilizacji kończyn.

WSKAZANIA

Ból lędźwiowy • statyczny ból lędźwiowy • ból lędźwiowy od prowadzenia samochodu • przykurcze mięśni • Łagodne urazy regionu lędźwiowo-krzyżowego • choroba zwyrodnieniowa • dyskopatie • rwa kulszowa.

ZAŁOŻENIE

1. Otwórz gorset szeroko, trzymając pętlę do góry.
2. Strona czołowa wykonana z 3 rzepów (jeden "większy" brzuch i drugi "mniejszy" boczny i skośny).
3. Najpierw wyreguluj dociągi na rzepy, mocując je na bocznych ukośnych rzepach.
4. Załóż gorset i przymocuj "duży rzep brzuszny", aby go odpowiednio dopasować.
5. Złap pasy i pociągnij je, aż dotrą do większej części brzucha, mocując je w obszarze środkowym.
6. Istnieją 4 pasy: najpierw zaczeplone dolne, a następnie górne.
7. Aby uzyskać idealne dopasowanie, upewnij się, że tylna i dolna krawędź są ustawione w połowie części pośladków.



Tenortho
Get back in action

via Trento e Trieste, 100
20853 Biassono (MB)
Italy

 tenortho.com

 info@tenortho.com

 +39 039 8943960

 [tenortho](https://www.facebook.com/tenortho)