



HOMERUS

Ref. TO2114

Dynamiczna orteza barku

OPIS

Lekkie i wygodne wsparcie medyczno-ortopedyczne. Innowacyjna konstrukcja i struktura z C6Tex z miękką elastyczną welurową tkaniną sprawiają, że orteza jest natychmiastowym rozwiązaniem w leczeniu urazów barków oraz jako wsparcie kończyn górnych dla osób z porażeniem połowicznym. Łatwy w noszeniu, zapewnia unieruchomienie przynosząc ulgę podczas codziennych czynności. Orteza została zaprojektowana w ten sposób, aby przez regulację rzepów móc ją zastosować do różnych schorzeniach. Skutkuje to lepszym dostosowaniem sprzętu do anatomicznych potrzeb. Posiada również trójkątną wkładkę przeznaczoną do modulowania wsparcia na różne sposoby w zależności od potrzeb terapeutycznych.

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

- Tkanina C6Tex JEST lekka i oddychająca.
- Posiada wkładkę modułową.
- Zapinana na rzepy.

PRZEZNACZENIE

Terapeutyczne i nieinwazyjne korygowanie problemów z postawą lub stabilizacją kończyn.

WSKAZANIA

- Niestabilność barku i stawu ramiennego
- Dynamiczne wsparcie stawu ramiennego i barku
- Choroba podbarkowa
- Choroba torebki stawowej
- Profilaktyka podczas aktywności sportowych - nadmierne zużycie struktur stawowych
- Porażenie połowiczne
- Ograniczona kontrola barku z powodu patologii neurologicznych.

ZAŁOŻENIE

1. Zamknięcie chwytu ramiennego przy zgięciu przedramienia.

2. Zapięcie paska na klatce piersiowej.

3. Zamknięcie dwóch punktów zamykających na poziomie (mięśnia czworobocznego trapezowego).

W zależności od różnych patologii specjalista ma możliwość wyboru bardziej odpowiedniego zastosowania wkładki trójkątnej.

najczęstsze patologie to:

A. Powstrzymanie zwinięcia: wkładka jest umieszczona z przodu, aby rzepy mogły owinąć staw obojczykowo-mostkowy, część klatki piersiowej i mięśnia naramiennego.

B. Wsparcie dla ramienia z porażeniem połowicznym: środkowy uchwyt na rzep jest umieszczony wzdłuż mięśnia czworobocznego trapezowego, dwa uchwyty są umieszczone w przedniej i tylnej części tułowia



Tenortho
Get back in action

via Trento e Trieste, 100
20853 Biassono (MB)

Italy



tenortho.com



info@tenortho.com



+39 039 8943960



tenortho



HOMERUS

Ref. TO2114

Dynamiczna orteza barku

ŁUDNOŚĆ I OGRANICZENIA W UŻYCIU

Urządzenia Tenortho są ogólnie wskazane do użytku u osób dorosłych powyżej 12 roku życia. Produkt powinien być używany wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem (patrz ulotka z instrukcją, rozdział "Wskazania"). Niektóre urządzenia, które mają różne rozmiary, pediatryczne lub są wykonane na miarę, mogą być również używane u dzieci w wieku od 3 lat. Zaleca się ostrożność i zasięgnięcie porady lekarza przed użyciem jakichkolwiek urządzeń, które mogą zakłócać działanie macicy u kobiet w ciąży (kołnierze ze stabilizatorami mostkowo-grzbietowymi, pasy lędźwiowe, gorsety, ortezy barkowe i biodrowe itp.). Szczególną uwagę i dokładną ocenę lekarską należy zwrócić na stosowanie aparatów ortodontycznych, które mogą utrudniać oddychanie u pacjentów z patologiami lub trudnościami w oddychaniu (nadmierne rozciągnięcia, gorsety, kołnierze, szelki, itp.). Produkt zawierający magnetoterapię (TO1308MG - TENOMAG) nie powinien być stosowany u kobiet w ciąży ani u osób z wszczepionymi urządzeniami (rozruszniki serca, defibrylatory lub implanty stałe). Zapoznaj się z instrukcją obsługi producenta urządzenia do magnetoterapii.

KONSERWACJA

Jeśli to możliwe, usuń szyny i metalowe ramy przed praniem. Pierz ręcznie w ciepłej wodzie z dodatkiem łagodnego mydła; następnie spłucz czystą wodą. Susz z dala od źródeł ciepła. Skontaktuj się z technikiem ortopedą w przypadku problemów lub zużytych części, które wymagają wymiany. Nie wyrzucać produktu do środowiska.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE STOSOWANIA

Urządzenie nie może wywierać nacisku na żadną część ciała, która jest zraniona lub opuchnięta. W przypadku wątpliwości co do zastosowania należy skonsultować się z technikiem ortopedą. Nie nosić urządzenia w pobliżu otwartego ognia.

NADZÓR ZDROWOTNY

W celu ciągłej kontroli stanu zdrowia w celu zapewnienia możliwie najbezpieczniejszego użytkowania produktów Tenortho, prosimy o zgłaszanie wszelkich poważnych działań niepożądanych, które wystąpią podczas stosowania produktu, wysyłając wiadomość e-mail na adres ufficiotecnico@tenortho.com. Należy również zgłosić zdarzenie właściwym organom.

OSTRZEŻENIA

Urządzenie musi być przepisane przez lekarza i założone przez technika ortopedę, który jest kompetentną osobą uprawnioną zarówno do zastosowania, jak i do udzielania informacji o bezpiecznym użytkowaniu. Założenie urządzenia musi być przeprowadzone z najwyższą starannością, aby zapewnić skuteczność, tolerancję i prawidłowe działanie. O wszelkich zmianach konstrukcyjnych i innych musi decydować lekarz i przeprowadzać je technik ortopeda. Zalecane jest użycie produktu przez jedną osobę. Bezpośredni kontakt urządzenia ze skórą może powodować zaczerwienienie lub podrażnienie u bardzo wrażliwych osób. Nie należy umieszczać produktu na zranionej skórze. W przypadku nietolerancji należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

SPRZEDAŻ

Nie wyrzucać produktu do środowiska. Produkt należy utylizować zgodnie z przepisami dotyczącymi odpadów obowiązującymi w gminie i / lub stanie. Produkt nie stwarza ryzyka zanieczyszczenia.

GWARANCJA


Tenortho zaświadcza, że produkt został wyprodukowany poprawnie, zastosowano materiały najwyższej jakości, zostały przeprowadzone wszystkie niezbędne testy oraz, że jest zgodny z obowiązującymi normami i przepisami. Tenortho zobowiązuje się naprawić wszelkie wady, brak jakości lub niezgodności Produktów, które nastąpiły z winy producenta, które powstaną w ciągu 6 (sześciu) miesięcy od dostawy Produktów, i które zostaną przekazane niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż siedem dni od dnia wykrycia wady lub usterki. Tenortho może podjąć decyzję o naprawie lub wymianie Produktów, które okażą się wadliwe. Produkty wymienione lub naprawione w ramach gwarancji będą objęte tą samą gwarancją przez 6 (sześć) miesięcy od dnia naprawy lub wymiany. Wady zgodności, a tym samym rękojnia, nie obejmują żadnych wad lub szkód powstałych w wyniku zdarzeń losowych lub z odpowiedzialności Użytkownika (np. Niedbałość, brak lub nieprawidłowe czyszczenie) lub używanie produktów niezgodne z ich przeznaczeniem lub normalnym zużyciem. Zachowaj opakowanie, etykiety i dowód zakupu, aby zapewnić odpowiednią identyfikowalność partii.




Prać ręcznie w ciepłej wodzie



Nie suszyć w suszarce

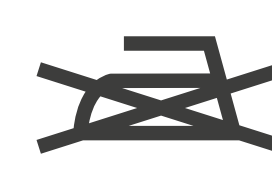

Nie prasować

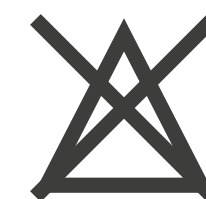

Nie wybielać



Produkt zgodny z rozporządzeniem UE 745/2017 - wydany 04/2021 - wersja 0
Certyfikowana firma: system jakości certyfikowany zgodnie z ISO 9001: 2015 i ISO 13485: 2016



Producent

REF

Artykuł nr.

LOT

Numer LOT



Wyrób medyczny