

Nazwa wyrobu
REF

Balkonik trzyfunkcyjny
BA-3F




Opis i przeznaczenie wyrobu.

Balkonik trzyfunkcyjny wykonany jest ze wzmocnionej poprzecznie aluminiowej ramy. Wyposażony jest w przednie nóżki z nasadkami i przednie nóżki z pełnymi kołami o średnicy 5". Balkonik pełni funkcję statyczną oraz kroczącą, która umożliwia naprzemienne przemieszczanie boczków bez konieczności podnoszenia. Posiada szerokie pole podparcia oraz długi zakres kroczenia. Gumowe uchwyty zapewniają odpowiednią stabilizację i wygodę używania. Wysokość balkonika może być dostosowana do wzrostu użytkownika dzięki regulowanym nóżkom. Po złożeniu balkonik zajmuje niewiele miejsca, dzięki czemu można go łatwo przechowywać i przewozić.

Wyrób spełnia wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2017/745 [MDR], jako klasa I

Elementy balkonika.

1. uchwyt
2. składanie ramy
3. zmiana funkcji
4. regulacja wysokości
5. gumowa nasadka antypoślizgowa
6. koło o średnicy 5"

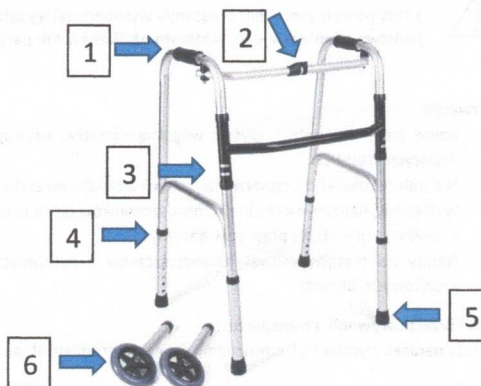

Zastosowanie Balkonika.

Balkonik trzyfunkcyjny jest sprzętem pomocniczym, przeznaczonym dla osób o obniżonej sprawności ruchowej, które potrzebują stabilnego podparcia i asekuracji podczas chodzenia. Zalecany jest także dla osób starszych, jako pomoc w utrzymaniu równowagi, poprawy komfortu poruszania się i zapewnienia bezpieczeństwa przed upadkiem. Zastosowanie balkonika wpływa również pozytywnie na powrót do aktywności osób ze schorzeniami kończyn dolnych, mających problemy z lokomocją lub pionizacją.

Montaż Rozłożenie i złożenie balkonika.

Przed rozłożeniem balkonika należy zamontować przednie nóżki z nasadkami lub z kółkami.

Aby rozłożyć balkonik, należy rozchylić boki do pozycji maksymalnej, aż do zablokowania uchwytów. Aby złożyć balkonik, należy docisnąć gumowy element znajdujący się na środku ramy poprzecznej i złożyć ramiona.

Regulacja wysokości.

Wysokość należy ustawić na takim poziomie, aby użytkownik opierając się na uchwytach, stał wyprostowany na tyle, na ile pozwala mu stan zdrowia, z ramionami w pozycji spoczynkowej i lekko ugiętymi łokciami. Niewskazane jest zawieszanie się na balkoniku całym ciężarem ciała. Aby wyregulować wysokość nóżki, należy wcisnąć metalowy pin, wybrać odpowiednią wysokość nóżki, a następnie zablokować położenie. Nóżki regulowane są skokowo co 2,5 cm. Uwaga! Wysokość na wszystkich nóżkach musi być ustawiona na tym samym poziomie.

Wybór funkcji

- Statyczna – należy ustawić oba piny blokujące w górnych otworach przeznaczonych do zmiany funkcji
- Krocząca – należy docisnąć gumowy element znajdujący się na środku ramy poprzecznej i lekko złożyć ramiona, następnie ustawić oba piny blokujące w dolnych otworach przeznaczonych do zmiany funkcji
- Nóżki z nasadkami lub nóżki z kółkami można montować bez względu na wybraną funkcję (kroczącą lub statyczną).

Specyfikacja techniczna.

Szerokość całkowita z nasadkami 55 cm,
Szerokość całkowita z kółkami 60 cm,
Szerokość wewnętrzna 46 cm,
Głębokość całkowita z nasadkami 46 cm,
Głębokość całkowita z kółkami 51 cm,
Regulacja wysokości 72-91 cm,
Waga 2,4 kg
Maks. obciążenie 136 kg.

Środki ostrożności i ostrzeżenia.

Nie przekraczać maksymalnego obciążenia



Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik lub pacjent mają miejsce zamieszkania

Konserwacja:

- Ramę balkonika należy czyścić wilgotną szmatką, używając tylko wody i łagodnych detergentów mających atest PZH.
- Nie należy używać do czyszczenia: ostrych środków polerskich, silnych detergentów, środków ściernych, wybielaczy, benzyny ani żadnych rozpuszczalników (grozi uszkodzeniem ramy, widocznymi ubytkami, a w konsekwencji – utratą praw gwarancyjnych).
- Należy na bieżąco usuwać zanieczyszczenia z ruchomych elementów balkonika (zawiasów, śrub zaciskowych, blokad) .

Warunki przechowywania i transportu.

Nie należy narażać wyrobu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wody i wilgoci.

Utylizacja.

Wyrób należy utylizować, jako odpad medyczny zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie gospodarki odpadami.

Dane dotyczące gwarancji.

Produkt objęty jest gwarancją, której warunki są opisane w karcie gwarancyjnej, należy zachować dowód zakupu (paragon lub fakturę).

Oznaczenia.

Numer referencyjny:



Numer serii:



Numer seryjny:



Uwaga:



Producent:



Data Produkcji:



Wyrób medyczny:



Zapoznaj się z instrukcją:



ORTHO24 Sp. z o.o.
ul. 75 Pułku Piechoty 1
41-500 Chorzów
info@ortho24.pl
tel: +48 730-000-417

ortho24

Wersja wydania 1_01.2026

Strona 2 z 2